

**Офисное массажное кресло
Massage Chair Askona
Smart Jet Office Relax**

ИНСТРУКЦИЯ ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ



Развитие науки и техники значительно изменило наш образ жизни, и сохранение здоровья превращается из модного понятия в полномасштабное движение. Данный продукт – офисное массажное кресло с мобильными функциями, пятиконечным основанием в паре с бесшумными роликами для легкой мобильности произведено для снятия болевых ощущений во время продолжительной работы, а также при малоподвижном образе жизни.

Отличительные особенности офисного массажного кресла:

- Удобная кожаная обивка с несколькими слоями, обеспечивающая комфортный массаж.
- Регулируемая по высоте подушка для шеи.
- Профессионально разработанная для эргономичной поддержки спинка имитирует разминающий массаж, глубоко расслабляя напряженные мышцы и улучшая общее состояние, и в то же время обеспечивая исключительный комфорт.
- Обогрев с независимым регулированием температуры, который помогает снять усталость и болевые ощущения.
- Эргономичный дизайн, включая функцию напоминания при длительном сидении, функцию откидывания для стабильного лежания, помогающую восстановить энергию и улучшить баланс тела.

Массажное кресло Askona Smart Jet Office Relax – помогает снизить усталость, восстановить физические силы и ментальное здоровье!

Благодарим вас за покупку этого товара.

Пожалуйста, внимательно прочтите данное руководство пользователя перед использованием, чтобы обеспечить правильную установку и эксплуатацию.



Храните данное руководство пользователя надлежащим образом для дальнейшего использования.

Содержание

01 МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	1
02 НАЗВАНИЕ И ФУНКЦИЯ КАЖДОГО КОМПОНЕНТА	3
Внешняя структура.....	3
Внутренняя структура.....	3
Инструкции для быстрых кнопок.....	4
03 СПОСОБ УСТАНОВКИ	5
04 РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ	6
Руководство по эксплуатации	6
Способы зарядки.....	6
После использования.....	6
05 УХОД И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	7
06 УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК	8
07 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	9
08 ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН	11

01 МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ


- ▶ Пожалуйста, прочтите все инструкции перед использованием.
- ▶ Меры предосторожности и предупреждения, перечисленные ниже, помогут обеспечить правильную эксплуатацию данного прибора.
- ▶ Несчастные случаи, вызванные неправильным использованием, подразделяются на «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ» и «ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ». Прочтите все ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ и ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ, приведенные ниже, и следуйте всем инструкциям, содержащимся в данном руководстве.

	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	Неправильная эксплуатация может привести к серьезным травмам пользователей.
	ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ	Неправильная эксплуатация может привести к травмам пользователей или повреждению изделия.


	Запрещено		НЕ разбирать
---	------------------	---	---------------------

Не подходит для лиц младше 18 лет.

Мы рекомендуем тем, у кого есть любое из следующих состояний, проконсультироваться с врачом перед использованием.


 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	<ul style="list-style-type: none">◆ Тем, у кого в организм имплантирован кардиостимулятор или электронные устройства.◆ Тем, кто проходит лечение, особенно те, кто плохо себя чувствует.◆ Тем, у кого злокачественные опухоли, острые заболевания, гипертония или болезни сердца. (необходимо находиться под наблюдением).◆ Женщины, которые беременны или у которых менструация.◆ Тем, у кого в прошлом или в настоящее время наблюдались симптомы травмы поясницы, онемение рук и ног, ненормальные состояния позвоночника.◆ Тем, у кого остеопороз, деформированные суставы, дисфункция или недавний перелом.◆ Тем, у кого кожные раны, бактериальные инфекции, другие специфические воспаления, или те, кому требуется спокойный отдых.◆ Тем, у кого сильная лихорадка.◆ При использовании данного изделия детьми, инвалидами или лицами с ограниченными возможностями на нем или рядом с ним необходим тщательный надзор.◆ Этот массажер оснащен функцией обогрева, на это следует обратить внимание людям с пониженной чувствительностью к теплу.◆ Тем, у кого наблюдается острый отек или кровотечение в области спины, следует проконсультироваться с врачом перед использованием.
--	--

Меры предосторожности при использовании контроллера


 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ	<ul style="list-style-type: none">◆ Не прикасайтесь к контроллеру мокрыми руками и не тяните за провод контроллера с силой.◆ Не проливайте воду или другую жидкость на кнопки управления, чтобы избежать неисправности.◆ Не кладите тяжелые предметы на контроллер.
--	---

01 МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ


Подходящие условия

 <p>ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ</p>	<ul style="list-style-type: none">◆ Не используйте этот прибор при температуре выше 40°C.◆ Не используйте данный прибор во влажной или пыльной среде.◆ Не используйте данное изделие и не вынимайте вилку из розетки во время грозы или разряда молнии.◆ Не ставьте на открытом воздухе.◆ Пожалуйста, ставьте изделие на ровную поверхность.◆ Не храните вблизи источников тепла, открытого огня или под прямыми солнечными лучами.
--	--

Меры предосторожности в отношении разъемов питания и шнура питания

 <p>ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ</p>	<ul style="list-style-type: none">◆ Убедитесь, что напряжение питания, указанное на заводской табличке, соответствует местному электроснабжению.◆ Не отсоединяйте шнур питания мокрыми руками во избежание поражения электрическим током.◆ Не тяните за шнур, возьмитесь за передний пластиковый конец, чтобы отсоединить его.◆ Не сжимайте шнур питания прибором или другими тяжелыми предметами◆ Не повреждайте, не перегибайте, не тяните сильно и не перекручивайте шнур питания.◆ Пожалуйста, используйте соответствующий адаптер, обратитесь за заменой к поставщику или квалифицированному специалисту.◆ Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен производителем, его сервисным агентом или специалистом аналогичной квалификации во избежание опасности.
--	---

Наилучшие способы безопасного использования


 <p>ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ</p>	<ul style="list-style-type: none">◆ Не кладите на изделие тяжелые предметы.◆ Не используйте другие терапевтические устройства вместе с данным изделием.◆ Не используйте его для длительных сеансов, чтобы избежать дискомфорта. Не используйте на область костей. Не используйте продукт в терапевтических целях. Не оставляйте работающее устройство без присмотра.◆ Прибором должен пользоваться только один человек, не используйте его одновременно двумя или более лицами во избежание повреждения изделия.◆ Не используйте продукт сразу после еды, это может вызвать дискомфорт.◆ Если вы почувствуете какой-либо дискомфорт во время работы с данным изделием, немедленно прекратите его использование.◆ Не рекомендуется использовать устройство более 15 минут.◆ Проверьте обивку и другие места, при наличии каких-либо повреждений не используйте ее и обратитесь за обслуживанием к квалифицированному специалисту по техническому обслуживанию.◆ Пожалуйста, правильно сидите во время использования прибора, чтобы избежать травм пользователя или повреждения изделия.◆ Если во время зарядки отключается питание, пожалуйста, выключите устройство, чтобы избежать опасностей при повторном включении питания.◆ Не используйте изделие с влажной кожей.◆ Это изделие не является водонепроницаемым. Не проливайте воду или другую жидкость на изделие. Перед утилизацией изделия извлеките из него батарейки.◆ Перед извлечением батареек отключите источник питания.◆ Утилизируйте батарейки надлежащим образом.
---	---

02 НАЗВАНИЕ И ФУНКЦИЯ КАЖДОГО КОМПОНЕНТА

Внешняя структура



Внутренняя структура

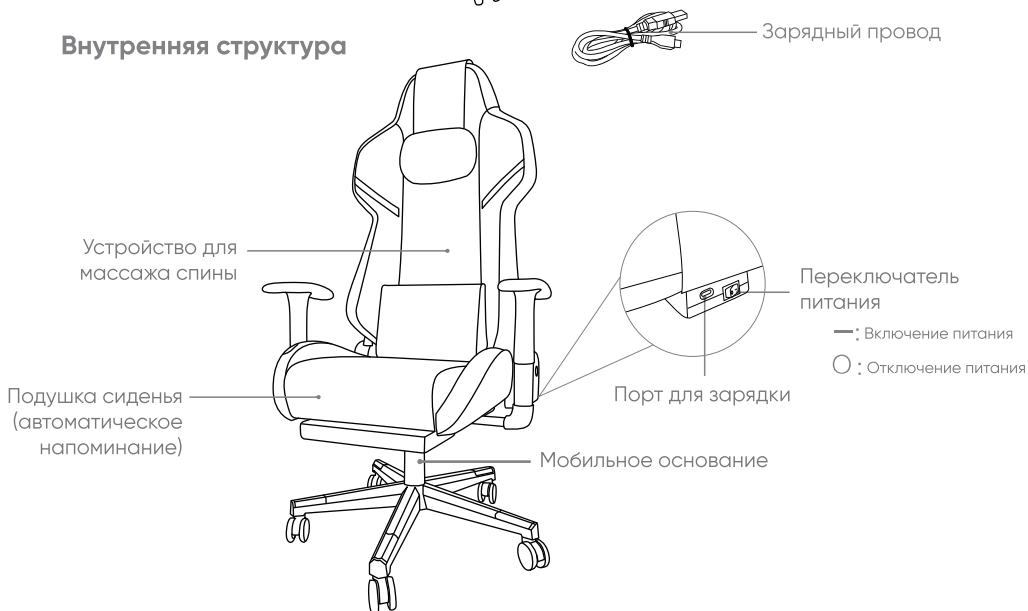

02 НАЗВАНИЕ И ФУНКЦИЯ КАЖДОГО КОМПОНЕНТА

Инструкции для быстрых кнопок

После включения главного выключателя питания устройство перейдет в режим ожидания, и будут доступны следующие функции:



Кнопка включения

В режиме ожидания, когда пользователь садится или нажимает любую клавишу, желтый индикатор продолжает гореть, а функциональные клавиши активны. Можно подключить Bluetooth, и операция продлится до 3 минут.

Длительное нажатие этой кнопки позволяет перейти в режим массажа, обозначаемый постоянным зеленым светом, по умолчанию используется режим успокаивающего разминания.

1-е короткое нажатие: Режим успокаивающего разминания - полный массаж спины низкой интенсивности, прогрев выключен;

2-е короткое нажатие: Режим восстановления - полный массаж спины средней интенсивности, нагрев включен;

3-е короткое нажатие: Режим глубокого массажа - полный массаж спины высокой интенсивности, нагрев выключен.

Длительность каждого режима - 15 минут.

Длительное нажатие этой кнопки выключит устройство, и механизм перезагрузится. На клавиатуре будет медленно мигать желтый цвет.

После завершения сброса индикатор будет гореть желтым цветом.

Если кто-то сядет в это время, индикатор будет постоянно гореть желтым цветом. После того, как вы покинете сиденье на 3 минуты, индикатор погаснет.



Кнопка точечного массажа

В любой программе нажмите один раз, чтобы перейти в режим точечного массажа, нажмите еще раз, чтобы выйти из режима точечного массажа.

Цвет индикатора

Постоянно горит желтый индикатор: функциональные клавиши активны, можно подключить Bluetooth.

Зеленый индикатор горит постоянно: в режиме массажа, полностью заряжен.

Мигает зеленый индикатор: зарядка продолжается.

Медленная вспышка красного света: разряжен аккумулятор.

Быстрая вспышка красного света: зарядка неисправна, проверьте, включен ли выключатель питания.

Медленная вспышка желтого света: сброс механизма.

Быстрая вспышка желтого света: состояние подключения к сети, состояние отключения.





ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

- ▶ Не пользуйтесь контроллером мокрыми руками во избежание поражения электрическим током или повреждения контроллера.
- ▶ Убедитесь, что в контроллер не попала вода или другая жидкость, чтобы избежать неисправности.
- ▶ Выключите выключатель питания и отсоединяйте массажное кресло от электрической розетки, пока оно не используется, чтобы дети случайно не включили питание массажного кресла.
- ▶ Если кресло не используется в течение длительного периода времени, мы рекомендуем накрыть его чехлом, смотать шнур питания и поместить устройство в помещение, защищенное от пыли и влаги.


03 СПОСОБ УСТАНОВКИ

Этапы установки


1. Установите пять бесшумных колес в пятиконечное основание.
2. Вставьте газовый баллон в пятиконечное основание и вставьте три секции муфты в газовый баллон.
3. Прикрепите лоток к нижней части подушки сиденья четырьмя винтами M8*20.

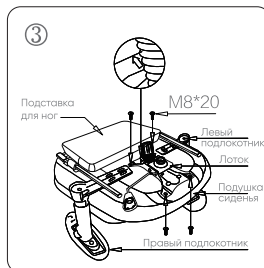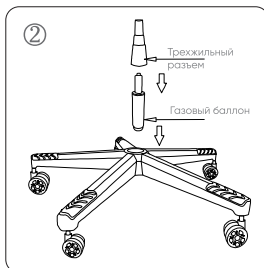

4. Вставьте компоненты подушки сиденья и закрепите их к газовому баллону.
5. Закрепите спинку и верхний рычаг регулировки угла наклона с помощью винтов M8*20.
6. Закрепите левый и правый корпуса регулятора угла наклона винтами M5*8 на соответствующем регуляторе угла наклона, а затем вставьте четыре пластиковых колпачка в соответствующие монтажные отверстия корпуса регулятора угла наклона.

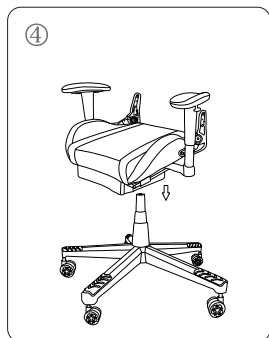

7. Подсоедините вилку питания к шнуру питания механизма спинки.

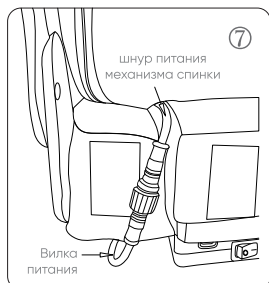

04 РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Руководство по эксплуатации

- ▶ Перед использованием проверьте, нет ли каких-либо повреждений изделия.
- ▶ Извлеките все принадлежности в соответствии со списком конфигурации изделия и проверьте, все ли принадлежности в комплекте, прежде чем устанавливать изделие. (Ознакомьтесь с подробными шагами установки)
- ▶ Поместите изделие в безопасное место. После завершения первой установки нет необходимости заряжать его. Вы можете сразу же приступить к массажу.
- ▶ Перед использованием устройства сначала включите главный выключатель устройства, а затем нажмите кнопку питания, чтобы перейти в режим массажа. (Подробную информацию смотрите в инструкции к контроллеру)

Способы зарядки

- ▶ При включенном главном выключателе устройства используйте прилагаемый зарядный кабель Type-C для зарядки устройства. После завершения зарядки устройство можно использовать.
- ▶ Низкий заряд батареи: Индикатор питания мигает красным;
- ▶ Зарядка: Индикатор питания мигает зеленым; Зарядка завершена: Индикатор питания горит зеленым.
- ▶ Во время зарядки функция массажа и напоминания о долгом сидении выключены.

После использования

- ▶ Нажмите кнопку питания на панели управления или выключите устройство.
- ▶ Когда устройство не используется, пожалуйста, выключите главный выключатель питания и храните его в надежном месте во избежание повреждения.
- ▶ Если он не используется в течение длительного времени, пожалуйста, накройте его пылезащитным чехлом.

Утилизация аккумулятора

Перед утилизацией изделия, пожалуйста, извлеките из него аккумулятор. Выполните следующие действия:

- ▶ Выключите питание.
- ▶ С помощью шлицевой отвертки аккуратно приподнимите внешнюю крышку.
- ▶ Затем снимите печатную плату.
- ▶ Отсоедините соединительный провод между аккумулятором и печатной платой и извлеките аккумулятор.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

- ▶ Во время процесса массажа рекомендуется отключить функцию "расслабление". Рекомендуется, чтобы угол наклона спинки находился в пределах регулируемого регулятором угла наклона (90 градусов - 135 градусов).
- ▶ По умолчанию прибор работает 15 минут, по истечении этого времени он автоматически переходит в режим ожидания. Нажмите кнопку питания для перезагрузки.
- ▶ Выключите выключатель питания и отсоединяйте прибор от электрической розетки, когда он не используется, чтобы дети случайно не включили его.

05 УХОД И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Инструкции по уходу и техобслуживанию

Чистка

- ▶ Перед чисткой обязательно выключите питание и отсоедините шнур питания от розетки.
- ▶ Для чистки изделия используйте мягкую ткань.
- ▶ Для удаления пятен протрите пятно влажной тканью с водой или мягким нейтральным моющим средством, затем вытрите другой тканью.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

- ▶ Никогда не подключайте и не выдергивайте шнур питания мокрыми руками.
- ▶ Никогда не мойте данное изделие водой, не допускайте попадания воды или другой жидкости внутрь изделия.
- ▶ Не используйте на изделии бензол, разбавитель или другие растворители, это может привести к выцветанию или повреждению изделия.
- ▶ Не пытайтесь самостоятельно разобрать устройство, пока оно мокрое, высушите его на воздухе.

Способы хранения

- ▶ Обязательно отключите питание перед хранением.
- ▶ Поместите устройство в среду, свободную от влаги, высокой температуры и летучих газов.
- ▶ Если изделие не используется в течение длительного периода времени, мы рекомендуем упаковать его в коробку, чтобы уберечь от пыли.
- ▶ Для длительного хранения изделия рекомендуется заряжать его один раз в два месяца. После распаковки и проверки зарядите его перед использованием.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

- ▶ Не оставляйте данное изделие на длительное время под прямыми солнечными лучами. Это может привести к выцветанию или повреждению.

Полезные советы

Во время ежедневного использования, пожалуйста, проверьте наличие следующих признаков:

- ▶ Запах гари.
- ▶ Питание включается и выключается при прикосновении к зарядному кабелю.
- ▶ Зарядный кабель нагревается или повреждается.
- ▶ Другие ненормальные признаки.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

- ▶ Пожалуйста, прекратите использование прибора во избежание поломок или несчастных случаев при наличии любого из вышеперечисленных признаков.
- ▶ Выключите кнопку питания и отсоедините вилку от розетки, обратитесь к нам или дилеру за ремонтом. Все остальные виды обслуживания, за исключением вышеуказанного ухода и техобслуживания, должны выполняться официальным дилером или сервисным центром.
- ▶ Не разбирайте данное изделие самостоятельно, чтобы избежать выхода изделия из строя.

06 УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

№.	Признак	Возможные причины	Возможные решения
1	Во время использования слышен шум	Звук – это нормально.	Нет необходимости принимать какие-либо меры.
2	Прибор не запускается	Массажер отключен от сети / зарядки.	Используйте его после полной зарядки.
		Выключатель питания выключен.	Включите выключатель питания.
		Таймер по умолчанию истекает.	Перезагрузите прибор.
		Прибор перегружен, и защита от перегрева отключает питание.	Повторите попытку после 60-минутного перерыва.
		Прибор перегружен.	Снимите нагрузку.

Если проблема не устранена, пожалуйста, свяжитесь с нами или авторизованным сервисным центром для проведения технического обслуживания.

Советы:

Не пытайтесь самостоятельно отремонтировать данное изделие, наша компания не несет ответственности за травмы или ущерб, причиненный каким-либо обслуживанием без разрешения.

07 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Название:	Massage Chair Askona Smart Jet Office Relax
Модель:	E16
Входное напряжение:	5В --- 9В --- 12В ---
Номинальная мощность:	15Вт 18Вт 25Вт
Применяемый стандарт:	GB4706.1, GB4706.10
Гарантия:	12 месяцев

В приведенной ниже форме указано название и содержание опасного вещества в данном продукте

Названия компонентов	Запрещенные вещества					
	Pd	Hg	Cd	Cr	PBB	PBDE
Наружная панель	○	○	○	○	○	○
Сборка печатной платы ※	×	○	○	○	○	○
Детали металлоконструкций	×	○	○	○	○	○
Резиновая деталь	○	○	○	○	○	○
Кабель питания/Адаптер питания	×	○	○	○	○	○
Внутренний соединительный кабель	○	○	○	○	○	○
Тканевый чехол	○	○	○	○	○	○

Эта форма составлена в соответствии с регламентом SJ/T 11364

- ※ : Сборки печатной платы включают в себя запасные части, из которых состоит вся печатная плата, такие как резистор, конденсатор, интегральная схема, разъемы и т.д.
- : Указывает на то, что концентрация опасного вещества во всех однородных материалах деталей ниже соответствующего порогового значения стандарта GB/T26572.
- × : Указывает на то, что концентрация опасного вещества по крайней мере в одном из всех однородных материалов в деталях превышает соответствующий порог стандарта GB/T26572.

Примечания к сроку службы, благоприятному для окружающей среды

Срок службы этих электрических и электронных изделий, при условии эксплуатации в соответствии с инструкцией, при которой опасные вещества или элементы не выделяются, не загрязняют окружающую среду и не причиняют вреда людям или имуществу, ограничен 10 годами.



Гарантийный талон

Примечание: Плата за услуги после истечения гарантийного срока взимается в зависимости от обстоятельств.

Не гарантийный случай:

1. НЕТ гарантийного талона или номера заказа на покупку.
2. Изменен гарантийный талон или номер заказа на покупку.
3. Ущерб, причиненный по непредвиденным причинам.
4. Неправильная эксплуатация из-за несоблюдения инструкций.
5. Неисправность или повреждение, возникшие в результате несанкционированного ремонта, модификации или разборки.

Модель.....

Дата покупки.....

Дата выпуска с завода-изготовителя.....

Тел. номер.....

Проблемы.....

Наименование товара.....

Адрес покупки.....

Имя клиента.....

Адрес.....

Компания Askona оставляет за собой право улучшать продукцию и инструкции по эксплуатации без предварительного уведомления. Данное руководство пользователя было тщательно проверено, но возможны ошибки, пропуски или вводящее в заблуждение содержание.

 Неправильная утилизация отходов может привести к загрязнению окружающей среды

Массажные кресла Askona Performance –
ваш личный массажист 24x7